

unlockcapture**&**share





Te presentamos nuestra nueva Moticam X y la tecnología MoticHUB, dos métodos únicos de actualizar instantáneamente tu actual microscopio.

No tires tu viejo microscopio. En tiempo de ajustes presupuestarios, reutiliza lo que ya has invertido y sácale el máximo provecho. En Motic hemos desarrollado dos soluciones únicas para convertir casi cualquier microscopio en un dispositivo compatible con una tablet wireless.





motic'sfreeapp



MotiConnect

Moticam X



La **Moticam X**, como todas nuestras soluciones Moticam, es un producto “All-In-One-Box”. Pero lo que distingue la Moticam X sobre el resto de cámaras es su alta resolución en streaming **WiFi**. Crea tu propia red wireless, accede con tu tablet Android o iOS y **observa, captura y edita** las imágenes en vivo de tu microscopio con la **App gratuita MotiConnect**.

En los casos donde el centro no permita la descarga de Apps y necesites utilizarlo, no hay problema, como la **Moticam X** está equipada con su propio **software instalado, podrás controlarla simplemente con tu navegador Web**, que te permitirá tanto capturar imágenes como hacer mediciones. La filosofía de Motic es que todas nuestras soluciones puedan ser herramientas destinadas a la enseñanza. La Moticam X también trabaja con cualquier ordenador provisto de WiFi en entorno Windows XP o superior, con lo cual, instalando el software standard Motic Images Plus, podrás utilizar este dispositivo en la pizarra interactiva del aula.



MoticHUB



La tecnología **MoticHUB** está **integrada** en nuestro software Motic Images Plus convirtiendo tu actual Moticam o microscopio Digital (equipado originalmente con el software de Motic) en una **solución digital en streaming WiFi**.

Esta **característica adicional**, te permite conectar **tu cámara o microscopio digital** a tu ordenador equipado con WiFi y entonces compartir en streaming la imagen a través de tu red, para que otros usuarios puedan obtenerla en sus ordenadores o **tablets WiFi**.

iPad


08:47

Main Menu

Gallery

Live Cam

Unit

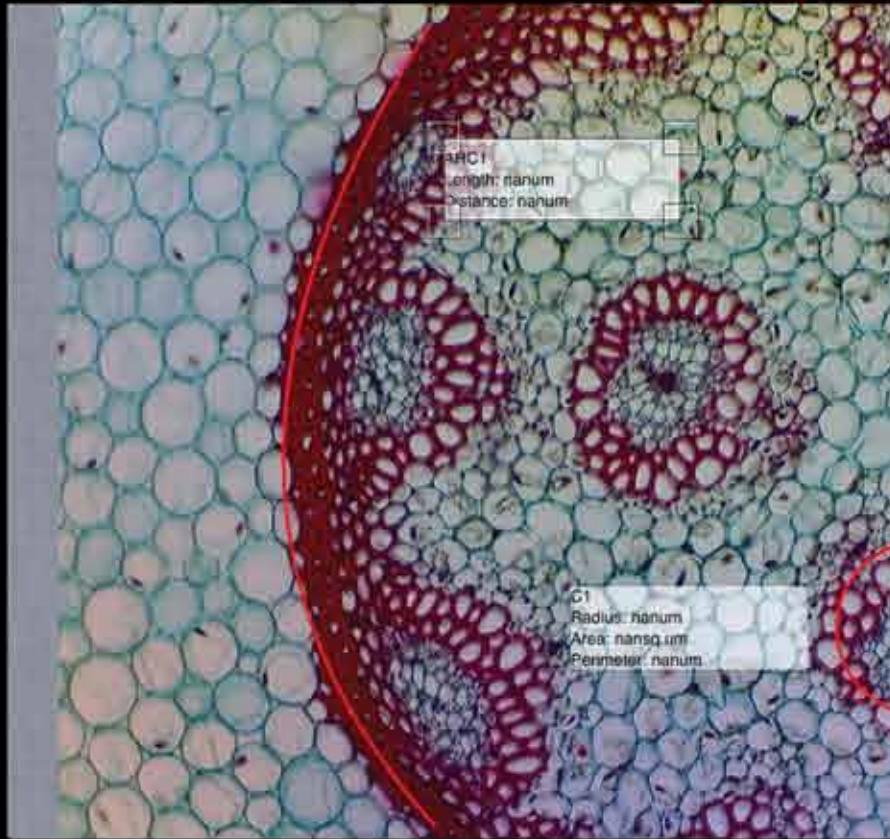

X



www.moticeurope.com
The Official European Motic Website

Moticam^X

Especificaciones Generales

Tipo de sensor	CMOS
Resolución del sensor	2.0MP
Resolución WiFi	1280x1024 pixels (1.3MP)
Tamaño del sensor	1/3"
Lente enfocable	12mm
Preparación de calibración	Incluida
Macro-tubo	Incluido
Alimentación	A través del adaptador
Dispositivos de observación:	PC o portátil con disponibilidad WiFi: <i>Motic Images Plus para PC</i> Tablets o Smartphones: <i>Aplicación gratuita App MotiConnect</i> Visor Universal: <i>Casi todos los navegadores Web HTML 5</i>

DE | EN | ES | FR | IT | PT | RU